

令和8年8月

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、この度、別表に掲げる項目につきまして検査内容の変更を  
させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。  
誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承を賜り  
ますようお願い申し上げます。 敬白

### ■検査内容変更項目

実施期日 (注1) 令和 8年10月 1日(木)受付分より

■検査受託中止実施期日(最終受付日)

実施期日 (注2) 令和 8年 9月29日(火)

実施期日 (注3) 令和 8年 9月30日(水)

## ■新規受託項目

実施期日 (注4) 令和 8年 9月30日(水)受付分より

## 検査内容変更一覧

| コード番号<br>(統一番号)  | 検査項目名             | 変更箇所       | 新                                          | 旧           | 備 考           | 注  |
|------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|----|
| 03535<br>(5C216) | プレセプシン            | 遠心条件       | 通常遠心                                       | 冷却遠心        | 遠心条件の見直し      | *  |
| 23350<br>(5A135) | 免疫電気泳動<br>(特異抗血清) | 検査法<br>その他 | 免疫固定法(IFE法)<br>専用報告書のレイアウト変更<br>コメント見直し    | 寒天ゲル免疫電気泳動法 | 検査内容の変更       | 注1 |
| 23360<br>(5A145) | ベンスジョーンズ蛋白同定      | 検査法<br>その他 | 免疫固定法(IFE法)<br>専用報告書のレイアウト変更               | 寒天ゲル免疫電気泳動法 | 検査内容の変更       | 注1 |
| 36141<br>(4G030) | 腓グルカゴン            | 備考の追加      | 検体は採血後よく混和し、<br>直ちに冷却遠心を行い、<br>凍結保存してください。 | -           | 検体取扱いの<br>適正化 | *  |

\*：腓グルカゴンとプレセプシン検体取扱いとは本案内以降、ご対応ください。

## 受託中止項目一覧（代替項目あり）

| コード番号<br>(統一番号)  | 検査項目名            | コード番号<br>(統一番号)  | 代替項目                | 注  |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|----|
| 32627<br>(3C070) | 総ホモシステイン (HPLC法) | 32628<br>(5F432) | ホモシステイン (LC-MS/MS法) | 注2 |

## 受託中止項目一覧（代替項目なし）

| コード番号<br>(統一番号)  | 検査項目名          | 中止理由       | 注  |
|------------------|----------------|------------|----|
| 04505<br>(3A020) | 蛋白分画（尿）        | 検査統合のため    | 注2 |
| 23310<br>(5A135) | 免疫電気泳動（抗ヒト全血清） | 測定機器老朽化のため | 注3 |

裏面につづく

## ● 新規受託項目一覧

| コード番号<br>(統一番号)  | 検査項目名   | 検体量<br>(mL) | 容器            | 保存 | 検査方法     | 基準範囲<br>(単位)                          | 所要日数 | 実施料<br>判断料 | 備考                                   | 注  |
|------------------|---------|-------------|---------------|----|----------|---------------------------------------|------|------------|--------------------------------------|----|
| 32628<br>(3C070) | ホモシステイン | 血漿<br>0.3   | T6<br>↓<br>S3 | 冷蔵 | LC-MS/MS | M:6.3~18.9<br>F:5.1~11.7<br>(nmol/mL) | 5~6  | 279<br>生Ⅱ  | 必ず採血後速やかに<br>血漿分離し、S3容器<br>に移してください。 | 注4 |

## ○ 免疫電気泳動（特異抗血清）

## ○ ベンスジョーンズ蛋白同定

本検査におきまして、従来法より感度が優れ微量のM蛋白を検出できる免疫固定法に変更いたします。  
特異抗血清による同定は異常タンパクの確認を目的として実施しているため、グロブリン分画の増減に関するコメント（「PolyclonalなIgGの増加」、「IgGの減少」等）は付記いたしません。  
報告内容はM蛋白の判定（例：陰性、IgG-λ型、IgA-κ型など）に限定して記載いたします。



## 新報告書見本

**免疫電気泳動検査報告書** <特異抗血清による同定>

医療機関 FMLクリニック  
氏名 リンショウ 知ゆ  
性別 男 年齢 50 才 受付日 2026年 7月18日  
カルテNo. 901 受付番号 8991807001  
検体材料 血清

<泳動パターン>  

(+) SP G A M κ λ

(-)  
<結果>  
陽性 IgG-κ 型

検査者

報告日 2026年 7月18日 責任者 原田 和幸

臨床検査部

**免疫電気泳動検査報告書** <Bence-Jonesタンパクの同定>

医療機関 FMLクリニック  
氏名 リンショウ 知ゆ  
性別 男 年齢 50 才 受付日 2026年 7月18日  
カルテNo. 901 受付番号 8991807001  
検体材料 尿

<泳動パターン>  

(+) SP G A M κ λ

(-)  
<結果>  
陽性 Bence-Jonesタンパク λ 型

検査者

報告日 2026年 7月18日 責任者 原田 和幸


臨床検査部

## ○ ホモシステイン

本検査におきまして、検査精度向上を目的として、HPLC法からLC-MS/MS法に変更いたします。



## 新旧二法の相関図

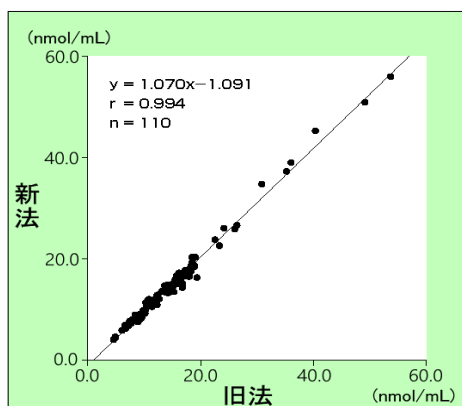

(委託先検討資料)